


**ENTERAL NUTRITION**

# **Udstyr til enteral ernæring**



# Freka® PÆD sonde, CH 6,5

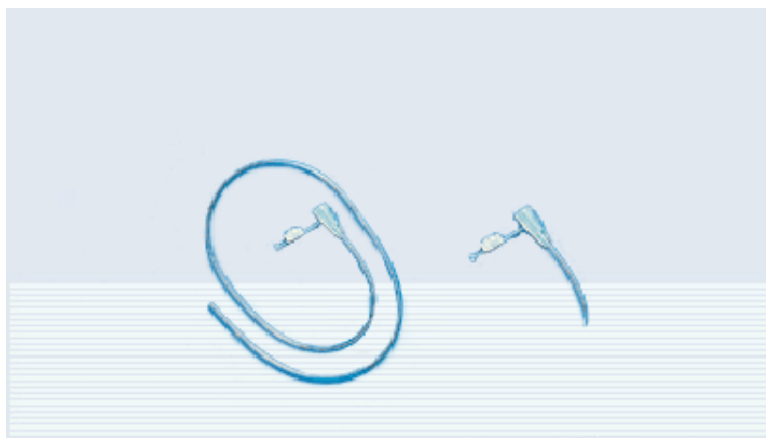

**Freka® PÆD sonde er en sonde i vævsvenlig polyuretan uden mandrin til børn. Velegnet til både korttids- og langtidsanvendelse.**

**Længdemarkering** for hver 10. cm for nøjagtig placering og kontrol af placering.


**Universal tragtåbning** til sondeernæring med luer sprøjte.

**Låg** til lukning af sonden, når den ikke er i brug.

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® PÆD sonde, CH 6,5, 50 cm	79 80 961	1 stk.

# Freka<sup>®</sup> sonde, CH 8

**Velegnet til både gastrisk, duodenal og jejunal placering**

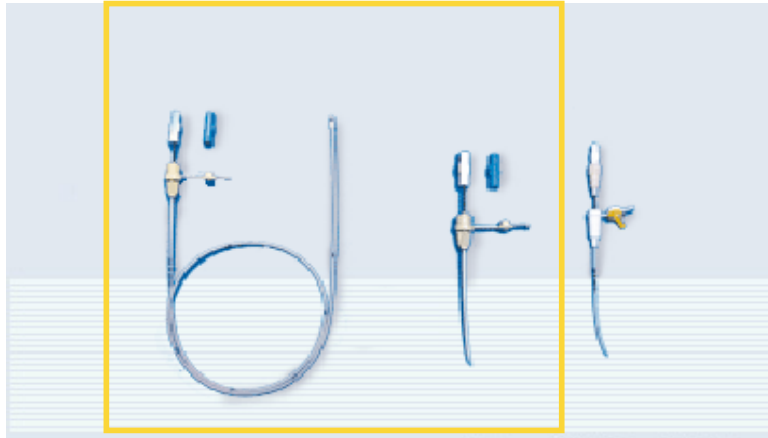

**Freka<sup>®</sup> sonden er en nasogastrisk ernæringssonde i blød og vævsvenlig polyuretan til både korttids- og langtidsanvendelse.**

**Spiralformet og hul mandrin** gør sonden let at indføre og muliggør aspiration gennem mandrinen for kontrol af placering vha pH-kontrol.

**Relativ stor indre diameter.** Den indre diameter er 2,1 mm → forebygger tilstopning af sonden.

**Røntgentæt.** Markering med røntgentæt materiale i sondens fulde længde → kontrol af placering med røntgen.

**Luer-lock tilkobling** giver en enkel og sikker kobling til såvel Applix ernærings sæt som andre ernærings sæt.

**Den distale ende** har én åbning på hver side af sonden for lettere gennemløb.


**Låg** til lukning af sonden, når den ikke er i brug.

**Længdemarkering** for hver 10. cm for nøjagtig placering

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka <sup>®</sup> sonde, CH 8, 60 cm	79 81 101	1 stk.
Freka <sup>®</sup> sonde, CH 8, 80 cm	78 40 051	1 stk.
Freka <sup>®</sup> sonde, CH 8, 120 cm	79 81 691	1 stk.

# Freka<sup>®</sup> sonde, CH 12

Velegnet til både gastrisk, duodenal og jejunal placering

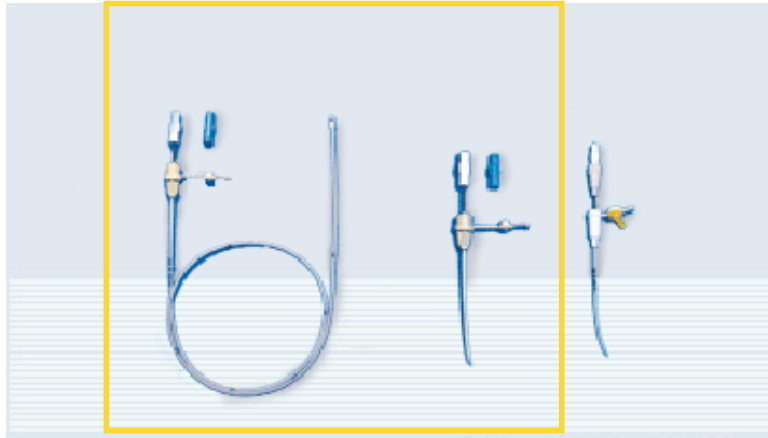

**Freka<sup>®</sup> sonden er en nasogastrisk ernæringssonde i blød og vævsvenlig polyuretan til både korttids- og langtidsanvendelse.**

**Spiralformet og hul mandrin** gør sonden let at indføre og muliggør aspiration gennem mandrinen for kontrol af placering vha pH-kontrol.

**Røntgentæt.** Markering med røntgentæt materiale i sondens fulde længde → kontrol af placering med røntgen.

**Luer-lock tilkobling** giver en enkel og sikker kobling til såvel Applix ernærings sæt som andre ernærings sæt.

**Tragttilkobling** giver mulighed for at anvende Janetsprøjte eller enteralsæt.

**Den distale ende** har én åbning på hver side af sonden for lettere gennemløb.


**Låg** til lukning af sonden, når den ikke er i brug.

**Længdemarkering** for hver 10. cm for nøjagtig placering

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka <sup>®</sup> sonde, CH 12, med luer-lock, 120 cm	79 81 811	1 stk.
Freka <sup>®</sup> sonde, CH 12, med tragt, 120 cm	79 81 821	1 stk.

# Freka<sup>®</sup> sonde, CH 15

**Velegnet til gastrisk placering**

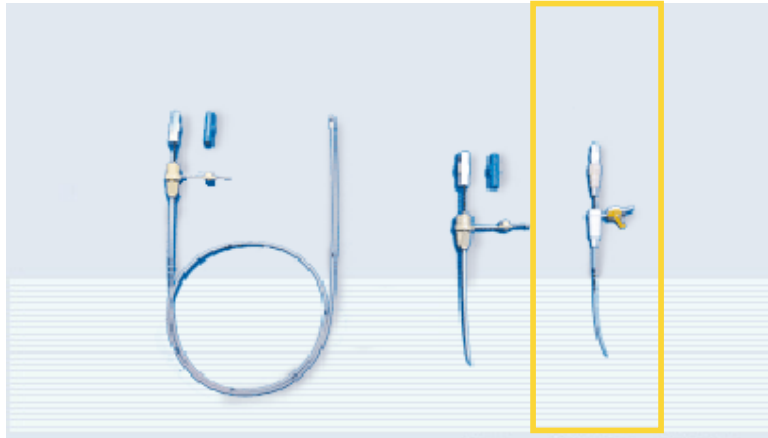

**Freka<sup>®</sup> sonden er en nasogastrisk ernæringssonde i blød og vævsvenlig polyuretan.**

**Spiralformet og hul mandrin** gør sonden let at indføre og muliggør aspiration gennem mandrinen for kontrol af placering vha pH-kontrol.

**Røntgentæt.** Markering med røntgentæt materiale i sondens fulde længde → kontrol af placering med røntgen.

**Tragttilkobling** giver mulighed for at anvende Janetsprøjte eller enteralsæt.


**Den distale ende** har én åbning på hver side af sonden for lettere gennemløb.

**Låg** til lukning af sonden, når den ikke er i brug.

**Længdemarkering** for hver 10. cm for nøjagtig placering

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka <sup>®</sup> sonde, CH 15, med tragt, 100 cm	79 80 111	1 stk.

**Sonde med tredobbelt lumen til tilførsel af ernæring og samtidig drænage af gastrisk væske**

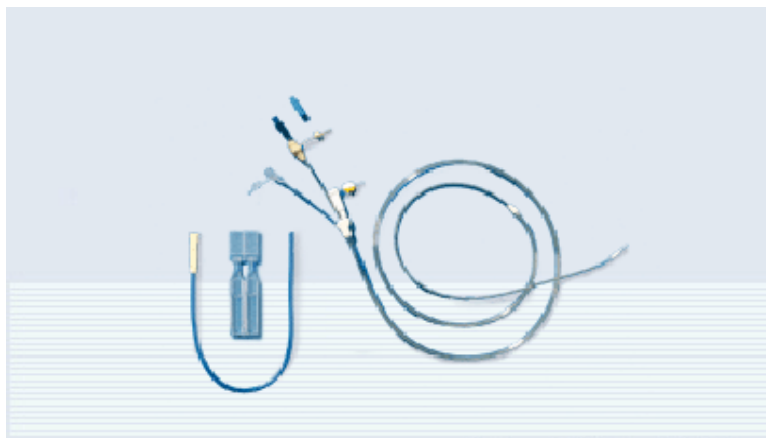

**Freka® Trelumina er en nasojejunal ernæringssonde i blød og vævsvenlig polyuretan.**

#### **Tre forskellige placeringsteknikker**

- Konventionel transnasal placering ved hjælp af røntgenkontrol
- Transnasal indføringsteknik ved hjælp af endoskopisk kontrol
- Indføring ved endoskopisk procedure (Seldinger teknik)

**Re-routing sonde** for enkel placering.

**Ernæringslumen**, CH 9 med luer-lock tilkobling.

**Aspirationslumen**, CH 16 med trykregulationslumen og 5 store laterale åbninger for drænage.


**Røntgentæt.** Markering med røntgentæt materiale i sondens fulde længde, muliggør kontrol af placering med røntgen.

**Låg** til lukning af sonden, når den ikke er i brug.

**Længdemarkering** for hver 10. cm for nøjagtig placering

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® Easy In, CH 16/8	77 55 011	1 stk.

**To sonder, der bliver til én;  
Til tilførsel af ernæring og samtidig drænage af gastrisk væske**

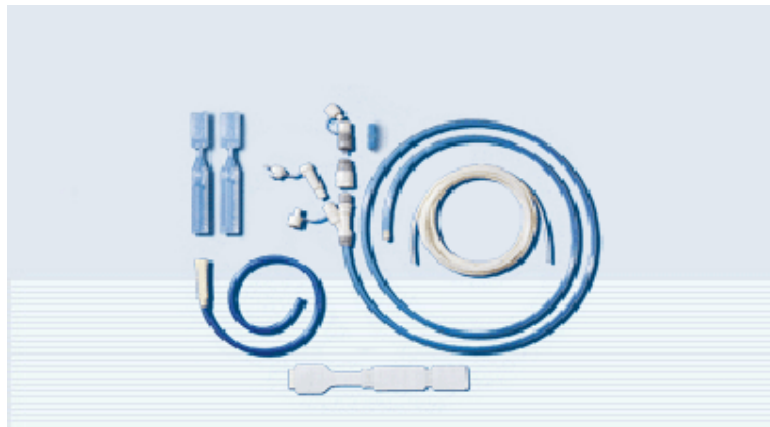

**Freka® Easy In er en nasojejunal sonde i blød og vævsvenlig polyuretan.**

**Variabel** længde på jejunalsonde

**Placeres** med endoskopi, ernæringssonde lægges på plads gennem arbejdskanalen og aspirationssonden føres ud over denne

**Re-routing sonde** for enkel placering

**Ernæringslumen, CH 8** med luer-lock tilkobling

**Aspirationslumen, CH 16** med 5 store laterale åbninger for drænage

**Røntgentæt.** Markering med røntgentæt materiale i sondens fulde længde, muliggør kontrol af placering med røntgen.

**Låg** til lukning af sonden, når den ikke er i brug.

**Længdemarkering** for hver 10. cm for nøjagtig placering

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® Trelumina, CH 16/9, 95/150 cm	77 50 911	1 stk.



**Freka® PEG er udstyr og sonde til initial anlæggelse af en gastrostomi ved anvendelse af “pull teknik”. Selve sonden og fikseringspladen er i vævsvenlig polyuretan til langtidsanvendelse.**

**Tre størrelser.** Findes i CH 9 (gul), CH 15 (blå) og CH 20 (lilla).


**Dobbelt tråd** til enkel og sikker fastgørelse af PEG-sonde ved placering.

**Røntgentæt** i fuld længde og i indre fikseringsplade.

**Bevægelig ydre fikseringsplade** til justering af sonden og forebyggelse af sår.

**Valgfri tilkobling.** Findes med både luer-lock og tragt-tilkobling

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® PEG, CH 9, 30 cm (gul)	79 01 051	1 stk.
Freka® PEG, CH 15, 35 cm (blå)	79 01 111	1 stk.
Freka® PEG, CH 20, 35 cm (lilla)	77 51 531	1 stk.

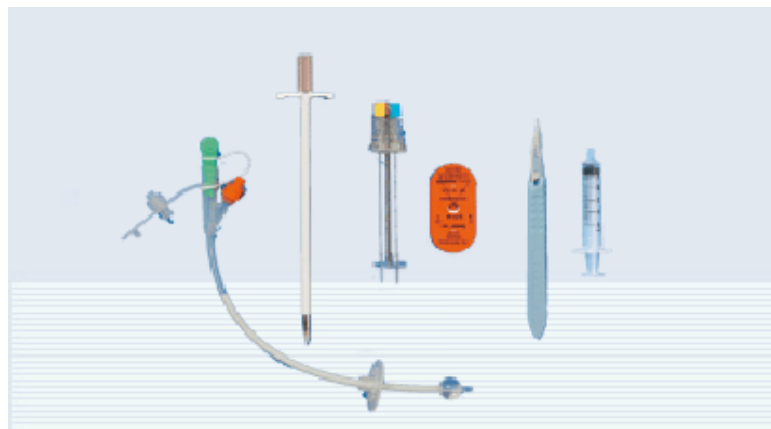

**Freka® Pexact er en ny teknik til anlæggelse af PEG. Anlæggelse med gastropexiateknik og direkte punkturteknik**

**Stomaen** sikres med suturer med den nye teknik.

**Muliggør** anlæggelse af PEG også i de tilfælde, hvor man ikke kan anvende et almindelig gastroskop. Nasalt gastroskop er tilstrækkeligt.

**Sonden føres ikke** ned igennem mund, svælg og spiserør.


**Fjernes og udskiftes** til gastrostomiport eller -knap uden sedation eller gastroskop.

**Størrelse** CH 15.

**Skiftes** inden 20 dage efter anlæggelse.

**Tragtilkobling** giver mulighed for at anvende Janetsprøjte eller enteralsæt.

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® Pexact, CH 15, 29 cm	76 01 361	1 stk.

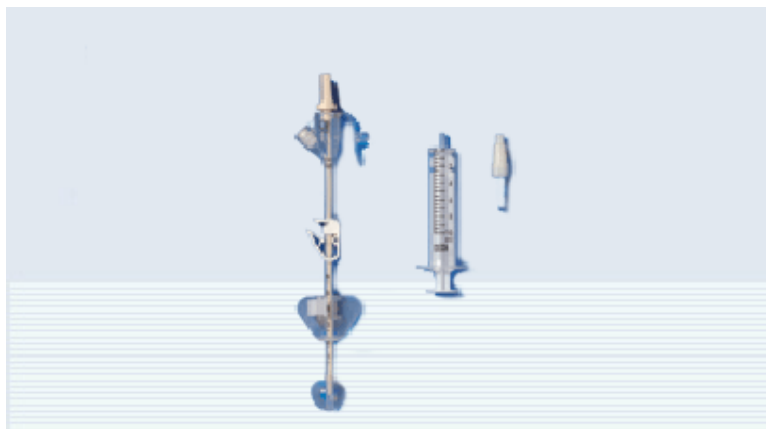

**Freka® Gastrotube er en udskiftningssonde efter PEG-sonde i blød, vævsvenlig silikone.**

**Størrelse CH 15.**

**Indre fiksering** med vandfyldt ballon til enkel placering og fjernelse.


**Ydre fiksering** med gennemsigtig og aksialt bevægelig fikseringsplade til inspektion og forebyggelse af sår.

**Skjult distal** ende for at undgå skade i ventrikel.

**Røntgentæt** i fuld længde og i bagkant af ballonen.

**Lang levetid.**

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® Gastrotube, CH 15, 19 cm	77 50 821	1 stk.

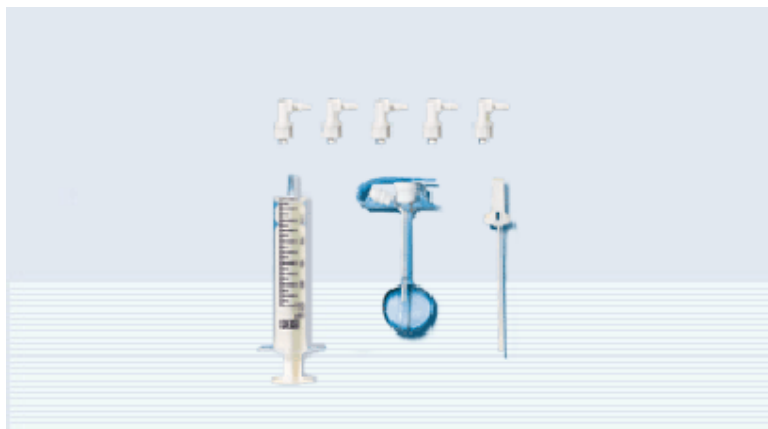

**Freka® Button er en gastrostomiport (knapsonde) til langtidsernæring af børn og voksne, som har fået etableret en gastrostomi.**

**Silikone.** Materialet er i medicinsk og vævsvenlig silikone.

**Skjult distal** ende for at undgå skade i ventrikel.


**Røntgentæt** i fuld længde.

**Vinkeladapter** tilkobles ved sondeernæring med ernærings sæt.

**Vinkeladapter og forlængerstykke** tilkobles ved ernæring med sprøjte.

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® Button, CH 15, 1,1 cm	77 51 241	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 1,4 cm	77 51 251	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 1,7 cm	77 51 261	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 2,0 cm	77 51 271	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 2,5 cm	77 51 281	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 3,0 cm	77 51 291	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 3,5 cm	77 51 301	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 4,0 cm	77 51 311	1 stk.
Freka® Button, CH 15, 4,5 cm	77 51 321	1 stk.
Forlængerstykke til sonde	79 81 93W	3 stk.
Vinkeladapter	77 50 801	20 stk.

# Freka® Jejunostomisæt

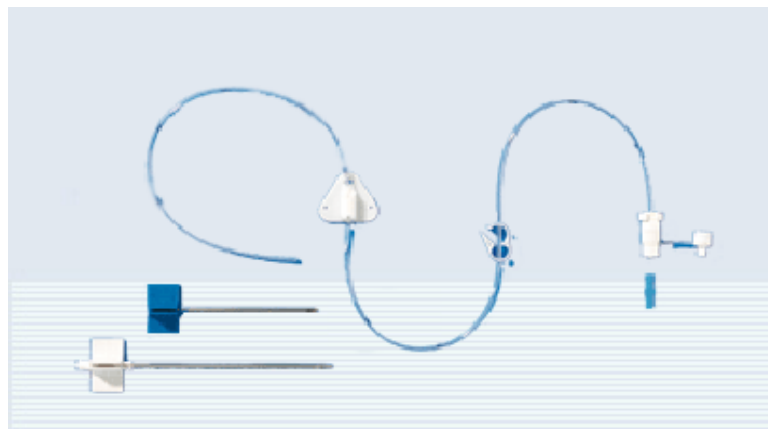

**Freka® Jejunostomisæt er et kirurgisk anlagt jejunostomisæt til postoperativ enteral ernæring.**

**Røntgenstribe** og interne sondemarkeringer letter anlæggelse og påvisning af sonde.

**Foldbar silikone fiksérplade** muliggør ekstern fiksering til abdomen og holder sonden på plads helt ned til huden.

**Blød**, men dog stiv sonde med minimal risiko for knæk af sonde.

**Størrelse CH 9.**

**Luer-lock tilkobling** giver en enkel og sikker kobling til Applix eller andre ernæringssæt.

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® Jejunostomisæt, CH 9, 75 cm	79 81 801	1 stk.



**Freka® PEG intestinalkateter er udstyr til Freka® PEG sonde til jejunal ernæring.**

**Kobles** sammen med Freka® PEG sonde.

**Muliggør** ernæring til tarmen med samtidig drænage af ventriklen.

**Placeres** med endoskop til jejunum.

**Røntgentæt** i fuld længde.

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Freka® PEG intestinalkateter, CH 9 til CH 15 PEG (blå)	79 01 191	1 stk.
Freka® PEG intestinalkateter, CH 9 til CH 20 PEG (lilla)	79 01 331	1 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Fiksérplade til Freka PEG, CH 9	79 03 002	5 stk.
Fiksérplade til Freka PEG, CH 15	79 04 002	5 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Reparationssæt til Freka PEG, CH 9	77 50 391	1 sæt
Reparationssæt til Freka PEG, CH 15	77 50 401	1 sæt
Reparationssæt til Freka PEG, CH 20	77 51 391	15 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Freka Universal tragtadapter, CH 15	79 81 971	15 stk.
Mellemstykke til tilkobling af nasalsonde eller PEG		



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Luer-lock adapter, blå	79 81 981	100 stk.
Blåt mellemstykke til gennemskylning eller medicinering gennem nasalsonderne med luer sprøjte		



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Positiv luer-lock connector, CH 9 til PEG	79 81 311	15 stk.
Positiv luer-lock connector, CH 15 til PEG	79 81 37Y	15 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Afslutningsprop til sonder og PEG, rød	79 81 36Y	15 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Slangeklemme til sonder og PEG	77 15 701	15 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Y-connector til PEG	79 81 392	5 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Plaster til nasalsonder	79 81 907	50 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
EasyBag bolusadapter	77 51 671	1 stk.

# Tilbehør og ernæringsposer



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Forlængerstykke til sonder	79 81 93W	3 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Vinkeladapter	77 50 801	20 stk.



Produkt	Varenummer	Pakningsstr.
Stomilængdemåler	77 50 921	1 stk.



Produkt	Varenr.	Pakningsstr.
Applix Duoline ernæringspose til bæltetaske	77 52 041	30 stk.



Produkt	Varenr.	Pakningsstr.
Applix ernæringspose	77 51 711	30 stk.

# Enteralsæt – til pumpe



Produkt	Varenr.	Pakningsstr.
---------	---------	--------------

Applix enteralsæt til pumpe, EasyBag	77 51 731	30 stk.
--------------------------------------	-----------	---------



Produkt	Varenr.	Pakningsstr.
---------	---------	--------------

Applix enteralsæt Varioline til pumpe, universalt	77 51 691	30 stk.
---	-----------	---------



Produkt	Varenr.	Pakningsstr.
---------	---------	--------------

Applix enteralsæt til pumpe, EasyBag mobil	77 51 781	30 stk.
--	-----------	---------

# Enteralsæt – gravitation



Produkt	Varenr.	Pakningsstr.
Enteralsæt, standard til EasyBag	77 51 041	30 stk.



Produkt	Varenr.	Pakningsstr.
Varioline standard, universal enteralsæt	77 51 011	30 stk.



**Enteral ernæringspumpe til mobil og stationær anvendelse**

**Lavt lydniveau**

**Enkel at anvende**

**Let at rengøre**

**Vejer kun 480 g**

**Giver 1-600 ml/time**

**Batteri virker i 24 timer ved 125 ml/time**

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse
Applix] Smart pumpe	77 51 981	1 stk.

## Bestilling af udstyr til enteral ernæring

### Hospitaler og grossister

Nomeco HealthCare Logistics

Telefon: 7024 3011

Telefax: 7024 3024

### Apoteker

Den sædvanlige medicingrossist

### Private kunder, plejehjem og institutioner

Kirudan A/S

Telefon: 3637 9130

Telefax: 3672 8322